



NeoRhIn Baby

CS K léčbě rýmy a ucpaného nosu
SK K liečbe nádchy a upchatého nosa
EN To treat colds and nasal congestion



NeoRhIn Baby:



Prečtete si pozorně návod k použití, protože obsahuje důležité údaje.

Přípravek NeoRhIn Baby je zdravotnický prostředek. Při jeho použití dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití. Ponechte si návod k použití pro případ, že budete potřebovat přečíst si jej znovu.

Určený účel: NeoRhIn Baby je určen pro děti starší 3 měsíců. Výrobek se aplikuje formou spreje po stlačení mechanického rozprašovače do nosních dírky tak, aby došlo k nanesení na nosní sliznici. NeoRhIn Baby se používá:

- ke zvlhčování suché nosní sliznice a čištění nosu, čímž se snižuje riziko infekcí,
- k léčbě rýmy a ucpaného nosu bez rizika vzniku závislosti a poškození nosní sliznice,
- ke snížení rizika komplikací rýmy (zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha).

Složení: Hypertonický roztok mořské soli (1,1 g/100 ml) se zvýšeným obsahem stopových prvků (Mg, Mn), dexpanthenol (1 g/100 ml), hydroxypropylmethylcelulóza, edetan disodný, aqua purificata. Zdravotnický prostředek neobsahuje deriváty krve.

Charakteristika: Výrobek obsahuje jako hlavní účinnou látku hypertonický roztok soli z Mrtvého moře, který zvlhčuje nosní sliznici, mechanickým způsobem čistí její povrch a na principu osmózy napomáhá k jejímu oplásknutí, čímž dojde ke zpříchodnění nosu. Panthenol blahodárně působí na podrážděnou nosní sliznici.

Indikace: NeoRhIn Baby je určený pro děti starší 3 měsíců k čištění nosu, zvlhčování nosní sliznice a přináší úlevu při rýmě a ucpaném nosu.

Kontraindikace: Nosní sprej nesmí být používán při známé přecitlivělosti na některou z obsažených látek, dále při onemocněních dýchacích cest, která jsou provázena jejich výraznou přecitlivělostí. Nepoužívejte po nosních operacích nebo traumatech v oblasti nosu.

Interakce: Při současném používání s prostředky odstraňujícími otok nosní sliznice používejte tento přípravek nejdříve. Při silnějších obtížích, které vyžadují časově omezenou aplikaci lokálně působících prostředků, se doporučuje po ukončení této aplikace ještě dále pokračovat v několika denním ošetřování nosním sprejem NeoRhIn Baby, dokud potíže neodezní.

Nežádoucí účinky: V ojedinělých případech může dojít k reakci z přecitlivělosti projevující se zčervenáním nosní dírky.

Dávkování a způsob aplikace: Přípravek je určen pro děti starší 3 měsíců. Nosní sprej může být používán dlouhodobě (více než 30 dnů) pro čištění nosních dýchacích cest a k podporné léčbě při nemoci z nachlazení. Pokud nedojde ke zlepšení obtíží, měli byste se obrátit na lékaře.

Před použitím lahvičky protřepejte a sejměte krytku rozprašovače. Dávkování pro jednotlivé indikace se provádí shodně, opakuje se dle potřeby (do zmírnění symptomů) několikrát denně. Počet denních dávek není omezený. Jednotlivá aplikace se provede jedním až třemi vstřiky mechanického rozprašovače.

Aplikaci dětem až do věku 6 let provádí dospělí.

Děti ve věku 3-6 měsíců se položí na záda s hlavou směřující dopředu a aplikace se provádí jedním vstřikem do každé nosní dírky. Při používání nosního spreje ve vodorovné poloze je nutné mezi každou dávkou aplikátor otočit do svislé polohy, nasměrovat do volného prostoru a stlačit, aby došlo k nasátí roztoku do rozprašovače.

Po použití rozprašovače opláchněte vlažnou vodou a znovu nasadte krytku rozprašovače. Před prvním použitím rozprašovače několikrát stlačte, aby došlo k nasátí roztoku do aplikátoru.

Upozornění: V případě zásahu očí je vypláchněte vodou. Neužívejte jedno balení přípravku více uživatelů, aby nedošlo k přenosu rýmy.

Uchovávání: Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu.



Varování: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti. Po prvním otevření nepoužívejte nosní sprej déle než 30 dnů.

Balení: Přípravek je dodáván v hnědé skleněné lahvičce opatřené aplikátorem s mechanickým rozprašovačem. Lahvička obsahuje 30 ml roztoku.

Likvidace: Nespotřebovaný přípravek vráte do lékárny.

Čistý obalový materiál likvidujte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz, www.phyteneo.cz

Údaje jsou uvedeny na obale.



Objem: 30 ml

Verze C-400-320-20-CZ-R0 ze dne 11. 3. 2020

5°C 25°C Omezení teploty.

LOT Číslo šarže.

☀️ Chráněte před slunečním zářením.

🕒 Použití do.

🍷 Křehké, zacházejte opatrně.

🏭 Výrobce.

REF Referenční číslo.

⚠️ Výstraha.



NeoRhIn Baby



Prečítajte si pozorne návod na použitie, pretože obsahuje dôležité údaje.

Přípravek NeoRhIn Baby je zdravotnická pomůcka. Při jeho použití dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu na použití. Ponechte si návod na použití pro případ, že ho budete potřebovat přečíst znovu.

Účel určení: NeoRhIn Baby je určený pro děti starší 3 měsíce. Výrobek se aplikuje formou spreje po stlačení mechanického rozprašovače do nosových dírky tak, aby došlo k nanesení na nosovou sliznici. NeoRhIn Baby se používá:

- k zvlhčování suché nosové sliznice a čištění nosu, čímž se snižuje riziko infekcí,
- ako liečba pri nádche a upchatom nose, bez rizika vzniku závislosti a poškodenia nosovej sliznice,
- k znižovaniu rizika pri komplikáciách nádchy (zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha).

Zloženie: Hypertonický roztok morskej soli (1,1 g/100 ml) so zvýšeným obsahom stopových prvkov (Mg, Mn), dexpanthenol (1 g/100 ml), hydroxypropylmethylcelulóza, edetan disodný, aqua purificata. Zdravotnícky prostriedok neobsahuje deriváty krvi.

Charakteristika: Výrobek obsahuje ako hlavnú účinnú látku hypertonický roztok soli z Mŕtveho mora, ktorý zvlhčuje nosovú sliznicu, mechanickým spôsobom čistí jej povrch a na princípe osmózy napomáha uvoľniť opuch nosovej sliznice, čím dojde k priechodnosti nosa. Panthenol blahodárne pôsobí na podráždenú nosovú sliznicu.

Indikácie: NeoRhIn Baby je určený pro děti starší 3 měsíce k čištění nosu, zvlhčování nosové sliznice a přináší úlevu při nádche a upchatom nose.

Kontraindikácie: Nosový sprej sa nesmie užívať pri známej precitlivosti na niektorú z obsiahnutých látok, ďalej ani pri ochoreniach dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané ich výraznou precitlivenosťou. Nepoužívajte po nosových operáciách alebo traumách v oblasti nosa.

Interakcie: Pri súčasnom užívaní s prostriedkami odstraňujúcimi opuch nosovej sliznice používajte tento prípravok najskôr. Pri silnejších ťažkostiach, ktoré vyžadujú časovo obmedzenú aplikáciu lokálne pôsobiaceho prostriedku, sa odporúča po ukončení tejto aplikácie ešte ďalej pokračovať v niekoľkokrát dennom ošetrovaní nosovým sprejom NeoRhIn Baby, pokiaľ ťažkosti neustúpia.

Nežiaduce účinky: V ojedinělých prípadoch môže dôjsť k reakcii z precitlivosti prejavujúcej sa začervenaním nosovej dierky.

Dávkovanie a spôsob aplikácie: Přípravek je určený pro děti starší 3 měsíce. Nosový sprej může být používán dlouhodobě (víac ako 30 dní) na čištění nosových dýchacích ciest a ako podporná liečba pri ochoreniach z prechladnutia. Pokiaľ nedojde k zlepšeniu ťažkostí, mali by ste sa obrátiť na lekára.

Před použitím flašičku pretrepte a odstraňte krytku rozprašovače. Dávkování pro jednotlivé indikace sa vykonáva rovnakým spôsobom, opakuje sa podľa potreby (kým sa príznaky nezmiernujú) niekoľkokrát denne. Počet denných dávok nie je obmedzený. Jednotlivá aplikácia sa prevedie jedným až tromi strekmi mechanického rozprašovača.


Aplikáciu deťom do 6 rokov vykonávajú dospelí.

Deti vo veku 3-6 mesiacov sa položia na chrbát s hlavou otočenou dopredu a aplikácia sa vykonáva jedným strekom do každej nosovej dierky. Pri použití nosového rozprašovača vo vodorovnej polohe je nutné medzi každou dávkou aplikátor otočiť do zvislej polohy, nasmerovať ho do otvoreného priestoru a stlačiť, aby došlo k nasatiu roztoku do rozprašovača.

Po použití rozprašovače opláchnite vlažnou vodou a znovu nasadte krytku rozprašovača. Pred prvým použitím rozprašovača niekoľkokrát stlačte, aby došlo k nasatiu roztoku do aplikátoru.

Upozornenie: V prípade zásahu očí ich vypláchnite vodou. Neužívejte jedno balení prípravku viaceri užívateľmi, aby nedošlo k prenosu nádchy.

Uchovávanie: Uchovávejte mimo dosahu a dohľad detí. Uchovávejte v pôvodnom obale.

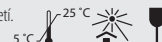

Varovanie: Prípravok nesmie byť používaný po uplynutí doby použiteľnosti. Po prvom otvorení nepoužívajte nosový sprej dlhšie ako 30 dní.

Balenie: Prípravok je dodávaný v hnedej sklenenej flašičke opatrenej aplikátorom s mechanickým rozprašovačom. Flašička obsahuje 30 ml roztoku.

Likvidácia: Nespotrebovaný prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál likvidujte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz, www.phyteneo.cz

Údaje sú uvedené na obale.



Objem: 30 ml

Verzia C-400-320-20-CZ-R0 zo dňa 11. 3. 2020

5°C 25°C Teplotný limit.

LOT Číslo šarže.

☀️ Chráněte před slunečním zářením.

🕒 Použitelné do.

🍷 Křehké, zacházejte opatrně.

🏭 Výrobca.

REF Referenčné číslo.

⚠️ Výstraha.



NeoRhIn Baby:



Please read these instructions for use carefully as they contain important information. NeoRhIn Baby is a medical device. When using this device, please follow these instructions for use. Keep this leaflet in case you need to read it again.

Intended purpose: NeoRhIn Baby is intended for children from the age of 3 months. The product is applied into the child's nostrils in the form of a spray by pressing a mechanical sprayer to evenly cover the nasal mucosa. NeoRhIn Baby is used:

- to hydrate dry nasal mucosa and clear the nose, thereby reducing the risk of infection,
- for the treatment of colds and nasal congestion without the risk of addiction and damage to nasal mucosa,
- to reduce the risk of complications associated with colds (sinusitis, inflammation of the middle ear (otitis media)).

Ingredients: Hypertonic sea salt solution (1,1 g / 100 ml) with a higher content of trace elements (Mg, Mn), dexpanthenol (1 g/100 ml), hydroxypropyl methylcellulose, disodium edetate, aqua purificata. The product does not contain blood derivatives.

Characteristics: The product's main active component is a hypertonic solution of salt from Dead Sea, which hydrates the nasal mucosa, mechanically cleans their surface and helps reduce swelling on the principle of osmosis, which clears the nose. Panthenol has a soothing effect on irritated nasal mucosa.

Indications: NeoRhIn Baby is intended for children from the age of 3 months to clear the nose, hydrate nasal mucosa and provide relief from colds and nasal congestion.

Contraindications: The nasal spray must not be used in case of known hypersensitivity to any of the ingredients or in case of respiratory illnesses accompanied by pronounced hypersensitivity. Do not use after nasal surgery or trauma in the area of the nose.

Interactions: When used in conjunction with products designed to reduce the swelling of nasal mucosa, use this product first. For more serious complications requiring the short-term application of topical products, it is recommended you continue treatment with NeoRhIn Baby nasal spray for several days after the end of this application until complications subside.

Adverse effects: In rare cases, a reaction may occur due to hypersensitivity, which presents as a redness of the nostrils.

Dosage and Method of Application: The product is intended for children from the age of 3 months. The nasal spray can be used long-term (more than 30 days) to clear nasal passages and to support the treatment of illnesses due to colds. If complications persist, you should consult your doctor.

Shake the bottle well and remove the cap from the sprayer before use. The dosage for each indication is performed in the same way and repeated several times a day, as needed (until symptoms subside). The number of daily doses is not limited. Compress the mechanical sprayer one to three times for each application.

The product should be applied by an adult for children up to the age of 6.

Children aged from 3-6 months are placed on their back with their head facing forward and the product is applied with one spray into each nostril. When using the nasal spray in a horizontal position, the applicator should be turned into a vertical position between each dose, directed away from the child and pressed to draw the solution into the sprayer.

After use, rinse the sprayer with lukewarm water and replace the cap. Before using the sprayer for the first time, press the sprayer several times to draw the solution into the applicator.

Warning: In case of eye contact, rinse with water. One pack of the product should not be used by more than one user to avoid the spread of colds.

Storage: Keep away from children. Store in the original package.

Caution: The product must not be used after the expiration date. Once opened, do not use the nasal spray for longer than 30 days.

Packaging: NeoRhIn Baby is sold in a brown glass bottle with a mechanical spray applicator. The bottle contains 30 ml of solution.

Disposal: Return any unused product to the pharmacy. Dispose of the clean packaging in the appropriate recycling container.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Czech Republic, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz, www.phyteneo.cz

Information stated on the package.



Volume: 30 ml

Version C-400-320-20-CZ-R0 dated 11 March 2020

5°C 25°C Temperature limit.

LOT Batch number.

☀️ Protect from sunlight.

🕒 Use by date.

🍷 Fragile, handle with care.

🏭 Manufacturer.

REF Catalogue number.

⚠️ Warning.



81594071270582



NeoRhin Baby

RO Pentru tratamentul guturaiului și a nasului infundat
EL Για την θεραπεία συναχίου και της βουλωμένης μύτης
HU Nátha és orrdugulás kezelésére

RO NeoRhin Baby



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, întrucât acestea conțin informații importante. NeoRhin Baby este un dispozitiv medical. La utilizarea acestuia respectați recomandările din prezentele instrucțiuni. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru cazul că va trebui să le citiți din nou.

Scopul propus: NeoRhin Baby este destinat copiilor având vârsta de peste 3 luni. Produsul se aplică sub formă de spray în urma presiunii atomizorului mecanic în nări în așa fel, încât produsul să ajungă pe mucoasa nazală. NeoRhin Baby este utilizat:

- pentru umectarea mucoasei nazale uscate și curățarea nasului, prin care se reduce riscul de infecție,
- ca tratament în cazul guturaiului și al nasului infundat, fără apariția riscului de adicție și afectarea mucoasei nazale,
- pentru reducerea riscului de complicații cauzate de guturai (inflamații ale cavităților nazale secundare, inflamația rinitei medii).

Compoziție: Soluție hipertonică de sare de mare (1,1 g/100 ml) cu conținut ridicat de microelemente (Mg, Mn), dexpanthenol (1 g/100 ml), hidroxipropilmetilceluloză, edetat de sodiu, aqua purificata. Preparatul medical nu conține derivate de sânge.

Caracteristici: Produsul conține, ca substanță activă principală, soluție hipertonică de sare de la Marea Moartă, care umezește mucoasa nazală, curăță mecanic suprafața acesteia și, pe baza principiului osmozei, ajută cu dezmulfarea acesteia, prin care se ajunge la libera respirație pe nas. Panthenolul acționează benefic asupra mucoasei nazale iritate.

Indicații: NeoRhin Baby este destinat copiilor având vârsta de peste 3 luni pentru curățarea nasului, umectarea mucoasei nazale și calmare în cazul în cazul guturaiului și al nasului infundat.

Contraindicații: Sprayul nazal nu are voie să fie utilizat în caz de hipersensibilitate cunoscută la vreunul dintre excipienții, de asemenea, nici în cazul afecțiunilor căilor respiratorii asociate cu hipersensibilitatea acestora. Nu utilizați în urma operațiilor nazale sau a traumatismelor în zona nazală.

Interacțiuni: În cazul utilizării simultane cu preparate care înăduă edemul mucoasei nazale, folosii mai întâi acest produs. În cazul unor complicații mai grave care necesită aplicarea limitată în timp a preparatelor cu acțiune locală, se recomandă ca, după finalizarea acestei aplicații, să continuați timp de câteva zile îngrijirea cu sprayul nazal NeoRhin Baby, până ce complicațiile dispar.

Efecte adverse: În cazuri izolate se poate produce reacția datorată suprasensibilității, care se manifestă prin roșea nării.

Dozare și modalitate de aplicare: Preparatul este destinat copiilor având vârsta de peste 3 luni. Sprayul nazal poate fi utilizat pe termen lung (pentru curățarea căilor respiratorii nazale mai mult de 30 de zile) și pentru tratamentul aușilor în cazul bolilor cauzate de răcire. În cazul în care dificultățile nu se ameliorează, ar trebui să consultați un medicul.

Înainte de utilizare agitați flaconul și dați jos capacul atomizorului. Dozarea pentru fiecare indicație se efectuează identic, se repetă în funcție de nevoie (până la atenuarea simptomelor) de câteva ori pe zi. Numărul dozelor zilnice nu este limitat. Fiecare aplicație se efectuează prin una sau mai multe pulverizări cu atomizor mecanic.

Aplicarea la copii până la vârsta de 6 ani o fac adulții.

Copiii având vârsta de 3-6 ani se culcă pe spate cu capul orientat înapoi și aplicația se efectuează printr-o singură pulverizare în fiecare nară. În cazul utilizării sprayului nazal în poziție orizontală, între fiecare doză, aplicatorul trebuie introdus în poziție verticală, trebuie orientat în spațiul deschis și presat pentru ca soluția să fie aspirată în atomizor.

În urma utilizării, spălați de fiecare dată atomizorul cu apă caldă și puneți la loc capacul atomizorului. Înainte de prima utilizare, apăsați de câteva ori atomizorul pentru a asigura aspirarea soluției în aplicator.

Atenție: În cazul contactului cu ochii trebuie să spălați ochii cu apă. Pentru a împiedica transmiterea guturaiului, recomandăm să evitați utilizarea unui flacon cu preparatul de către mai multe persoane.

Depozitare: Păstrați departe de accesul și vederea copiilor. Păstrați în ambalajul original.

Avvertizare: Produsul nu are voie să fie utilizat după expirarea termenului de valabilitate. După prima deschidere, nu utilizați sprayul nazal mai mult de 30 de zile.

Ambalaj: Produsul este livrat într-un flacon de sticlă maro prevăzut cu aplicator cu atomizor mecanic. Flaconul conține 30 ml soluție.

Lichidare: Returnați produsul neutilizat la farmacie. Materialul curat al ambalajului trebuie aruncat în containerul aferent pentru deșeurii sortate.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Republika Cehá,
e-mail: phyteneo@phyteneo.cz, www.phyteneo.cz

Datele sunt specificate pe ambalaj.



Volum: 30 ml

Veriunea C-400-320-20-CZ-RO din data de 11.3.2020

Limita de temperatură.	Număr șarjă.
Protejați contra radiațiilor solare.	Date privind expirarea valabilității.
Fragil, manipulați cu atenție.	Denumirea producătorului.
Numărul de referință.	Avvertizare.

EL NeoRhin Baby



Διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες χρήσης επειδή περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Το παρασκευασμένο NeoRhin Baby είναι υγροποιημένο προϊόν. Κατά την χρήση του να τηρείτε της οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για περίπτωση, αν θα χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Προβλεπόμενη χρήση: Το NeoRhin Baby είναι προορισμένο για παιδιά μεγαλύτερα των 3 μηνών. Το προϊόν εφαρμόζεται με τη μορφή ψεκασμού μετά την πίεση του μηχανικού ψεκαστήρα στα ρουθούνια, έτσι ώστε να γίνει επιστροφή στο ρινικό βλεννογόνο. Το NeoRhin Baby χρησιμοποιείται:

- για την ύγρανση του ξηρού ρινικού βλεννογόνου και καθαρισμό της μύτης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο λοίμωξεων,
- σαν θεραπεία του συναχίου και του βουλώματος της μύτης χωρίς το κίνδυνο εξάρτησης και βλάβης του ρινικού βλεννογόνου,
- για τη μείωση του κινδύνου επιπολικών ρινιτίδων (φλεγμονή παραρινικών κούλων, μέση ωτίτιδα).

Σύσταση: Υπερτονικό διάλυμα θαλασσίου αλατός (1,1 g/100 ml) με αυξημένη περιεκτικότητα σε ιγνοστοχεία (Mg, Mn), δεξπανθενόλη (1 g/100 ml), υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, εδετικό νάτριο, aqua purificata. Ιατρική σύνθεση δεν περιέχει τα παράγωγα αίματος.

Χαρακτηριστικά: Το προϊόν περιέχει σαν κύριο δραστικό συστατικό το υπερτονικό διάλυμα θαλασσινού αλατιού, που υγραίνει το ρινικό βλεννογόνο, με το μηχανικό τρόπο καθαρίζει την επιφάνεια του βόση τη αρχής της ώσμωσης, βοηθά στην ισοπέδωση, γεγονός που καθιστά τη μύτη διαπεραστή. Η παθενόλη έχει ευεργετική επίδραση στον ερεθισμένο ρινικό βλεννογόνο.

Ενδείξεις: Το NeoRhin Baby είναι προορισμένο για παιδιά μεγαλύτερα των 3 μηνών για το καθαρισμό της μύτης και την ύγρανση του ξηρού ρινικού βλεννογόνου και παρέχει ανακούφιση κατά του συναχίου και ρινικής συμφόρησης.

Αντενδείξεις: Το ρινικό σπρέι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας σε κάποια από τις περιεχόμενες ουσίες, παρακάτω σε διάρκεια ασθένειας των αναπνευστικών οδών που συνδυάζονται με σημαντική υπερευαισθησία. Μην το χρησιμοποιείτε μετά από ρινικές χειρουργικές επεμβάσεις ή τραυματίων στην περιοχή της μύτης.

Αλληλεπιδράσεις: Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης με πρόταση καταστολής ρινικού οπίσθιατος του βλεννογόνου, χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν ως πρώτο. Σε περίπτωση ισχυρότερων προβλημάτων που απαιτούν χρονικά περιορισμένη εφαρμογή των τοπικά ενεργών καταπονητικών, συστήματα από το θεραπευτικό αυτό να συνεχίσει ακόμη μερικές μερικές συνεχείς της θεραπείας με το ρινικό σπρέι NeoRhin Baby, μέχρι να εξασθενίσουν τα προβλήματα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί αντίδραση υπερευαισθησίας, που εκδηλώνεται με το κοκκίνωμα του ρουθουνίου.

Δοσολογία και τρόπος εφαρμογής: Το προϊόν προορίζεται για παιδιά μεγαλύτερα των 3 μηνών. Το ρινικό σπρέι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα (περισσότερο από 30 ημέρες) για το καθαρισμό των ρινικών εραργονών και ως υποστηρικτική θεραπεία για τη αρρώστια από το κρυολόγημα. Εάν δεν θα βελτιωθούν τα συμπτώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας. Πριν την χρήση κουνίστε καλά το μπουκαλάκι και αφαιρέστε το καπάκι του εκνεφωτή. Η δοσολογία για την κάθε μεμονωμένη ένδειξη πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, επαναλαμβάνεται κατά την απαίτηση (έως της ανακούφισης των συμπτωμάτων) μερικές φορές την ημέρα. Ο αριθμός των ημερησίων δόσεων δεν είναι περιορισμένος. Κάθε εφαρμογή εκτελείται από έναν έως τρεις ψεκασμούς του μηχανικού ψεκαστήρα.

Η εφαρμογή σε παιδιά έως 6 ετών γίνεται από ενήλικες.

Το παιδί ηλικίας 3-6 μηνών να ελαφρώς στην πλάτη τους με το κεφάλι τους στραμμένο προς τα εμπρός και η εφαρμογή γίνεται με ένα ψεκάσμα σε κάθε ρουθόνιο. Κατά την χρήση του ρινικού υγρού σε οριζόντια θέση είναι απαραίτητο να υγραίνεται τον εφαρμοστή με κατακόρυφη θέση μεταξύ κάθε δόσης, να τον κατεβάζετε στον ελεύθερο χώρο και να τον πιέσετε για την απορρόφηση του διαλύματος στον εκνεφωτή. Μετά την χρήση ξεπλύνετε το εκνεφωτή με χλιαρό νερό και τοποθετήστε ξανά το καπάκι του εκνεφωτή. Πριν την πρώτη χρήση πιεστε μερικές φορές τον εκνεφωτή, ώστε να αντληθεί το διάλυμα στο ψεκαστήρα.

Προσοχή: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην κάνετε χρήση μιας συσκευασίας προϊόντος από περισσότερες ασθένειες, να μην μεταδοθεί το συνάχι.

Διατήρηση: Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βέλπουν και δεν προορσώνουν τα παιδιά. Φυλάσσεται στην αυθεντική συσκευασία.


Προειδοποίηση: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. Μην κάνετε χρήση του ρινικού σπρέι περισσότερο από 30 μέρες μετά το πρώτο άνοιγμα.

Συσκευασία: Το προϊόν διατίθεται σε καφέ γυάλινο μπουκαλάκι εφοδιασμένο με ψεκαστήρα με μηχανικό εκνεφωτή. Το μπουκαλάκι περιέχει 30ml διαλύματος.

Απόρριψη: Το αχρησιμοποίητο προϊόν επιστρέφει στο φαρμακείο. Το καθαρό υλικό συσκευασίας απόρριψη σε ανάλογους κώδους διαλογής απορριμμάτων.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Τοεχική Δημοκρατία,
e-mail: phyteneo@phyteneo.cz, www.phyteneo.cz

Στοιχεία που αναγράφονται στην συσκευασία.

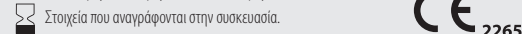

Όγκος: 30ml

Έκδοση: C-400-320-20-CZ-RO από ημέρα 11.3.2020

Όριο θερμοκρασίας.	Αριθμός παρτίδας.
Προστατεύετε από το ηλιακό φως.	Δεδομένα λήξης.
Εύθραστο, χειρίζεστε με προσοχή.	Σήμανση κατασκευαστή.
Πριν αριθμό καταλόγου.	Προσοχή, προειδοποίηση.

HU NeoRhin Baby



Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mivel fontos információkat tartalmaz. A NeoRhin Baby egy orvostechnikai eszköz. Kövesse a használati útmutatót. Őrizze meg a használati utasítást arra az esetre, ha újra el kéne olvasnia.

Rendeltetés: NeoRhin Baby 3 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült. A termék permet formájában kell alkalmazni az orryukakban a mechanikus porlasztó megnyomásával, oly módon, hogy az orryálkahártyára kerüljön. A NeoRhin Baby használatk:

- nedvesíti a száraz orryálkahártyát és tisztítja az orrot, ezáltal csökkenti a gyulladásokat,
- nátha és orrdugulás kezelésére, függőség kialakulásának kockázata és az orryálkahártya károsodása nélkül,
- a nátha szövödményeinek csökkentésére, középfül gyulladás, orrméllékureg gyulladása.

Összetétel: Hipertóniás tengeli só oldat (1,1 g/100 ml) megnövelt nyomelem tartalommal (Mg, Mn), dexpanthenollal (1 g/100 ml), hidroxipropil-metil cellulózzal, dinátrium-edetáttal, aqua purificata. A készítmény nem tartalmaz vér származékokat.

Jellemzők: A készítmény fő hatóanyagja a Holt-tengerből kinyert só hipertóniás oldata, amely hidratálja az orryálkahártyáját, fizikai úton elősegíti a nyálkahártya felületének megtisztulását és az ozmózis elve alapján elősegíti a nyálkahártya duzzadásának enyhülését. A pantenol jótékony hatással van az irritált orryálkahártyára.

Ajánlat: NeoRhin Baby 3 hónapnál idősebb gyermekek számára készült, az orr tisztítására, az orryálkahártyájának hidratálására, valamint a megfázással együtt járó tünetek, mint orrdugulás és orrfájdalom enyhítésére.

Nem ajánlott: Az orrspray használatát nem ajánlott, amennyiben a használt összetevők bármelyikével szemben túlérzékenységre panaszkodna, valamint olyan légtét megbetegedések esetén, amelyek jelentős túlérzékenységgel járnak. Orrműteti beavatkozást követően vagy orrrájéki sérülés esetén nem ajánlott a készítmény felhasználása.

Interakció: Többféle orrspray egyidejű használata mellett előbb ezt a terméket javasolt használni. Súlyosabb problémák esetén, amelyek időben korlátozott helyi alkalmazást igényelnek, javasolt a NeoRhin Baby orrspray alkalmazását a kezelés végétől számított néhány napig folytatni, amíg a probléma megszűnik.

Mellekhatások: Ritkán túlérzékenységi reakció léphet fel, amely az orryukak bepirosodásában nyilvánul meg.

Adagolás és alkalmazás módja: A készítmény 3 hónaposnál idősebb gyermekek részére készült. Az orrspray hosszú ideig használható (30 napon túl) orr és a légutak tisztítására, ugyanakkor a megfázás kezelésének támogatására. Ha a probléma nem javul, keresse fel háziorvosát.

Használat előtt rázza fel az üveget és távolítsa el a porlasztón található védősapkát. Az egyes indikációk esetében az adagolás ugyanúgy történik, szükség esetén naponta többször meg kell ismételnit (amíg a tünetek nem enyhülnek). A napi adagok száma nem korlátozott. Az egyes alkalmazásokat a mechanikus porlasztóval egy-három alkalommal végzett befecskendezéssel kell végrehajtani.

6 éves kor alatti gyermekek esetében az alkalmazást felöltött végzi.

A 3-6 hónapos gyermekek fejét előre hátra fektetjük, és az alkalmazást mindkét orryukba egy befecskendezéssel véggezzük. Ha az orrspray vízszintes helyzetben használjuk, az egyes adagok között az applikátor függőleges helyzetbe kell fordítani, a szabad térbe kell irányítani, és meg kell nyomni, hogy felszívja az oldatot a porlasztóba.

Használat után öblítse le a porlasztót langyos vízzel és helyezze vissza a porlasztó védősapkáját. A porlasztót használat előtt többször nyomja meg, hogy az oldat az applikátorba kerüljön.

Figyelmeztetés: Ha az oldat szembe kerül, bő vízzel öblítse ki azonnal. Kizárólag egy felhasználó használja a készítményt, elkerülje a cseppfertőzés eshetőségét.

Tárolás: Gyermekektől elzárva tartandó. A készítmény az eredeti csomagolásban tárolandó.


Figyelmeztetés: A lejárató idő után a terméket nem ajánlott használni. A készítmény az első használatot követő 30 napon belül felhasználandó.

Somagolás: A termék barna üvegben szállítják, porlasztóval ellátott applikátorral felszerelve. Az üveg 30 ml oldatot tartalmaz.

Likvidáció: A felhasználás csomagolást a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobja.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Cseh Köztársaság,
e-mail: phyteneo@phyteneo.cz, www.phyteneo.cz

Az adatok a csomagoláson láthatók.

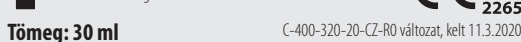

Tömeg: 30 ml

C-400-320-20-CZ-RO változat, kelt 11.3.2020

Hőmérsékleti határ.	A tétel száma.
Védje napfénytől.	Felhasználható.
Tűrékeny, óvatosan kezelje.	Gyártó.
Referenciaszám.	Vigázat, figyelmeztetés.